


Dental  Combo

**Ваш дилер**



Dental  Combo

**Производитель**  
ООО «Эстэйд-Сервисгруп»

**Офис продаж:**  
117405, Москва, Варшавское шоссе, д. 141, стр. 80  
Тел./факс: 8 (495) 633-94-19, тел.: 8 (495) 792-90-20

**Каталог продукции**

**ООО «ЭСТЭЙД-СЕРВИСГРУП»**



**ООО «Эстэйд-Сервисгруп»** является отечественным производителем расходных материалов и изделий медицинского назначения для стоматологии и медицины с 2002 года.

**Смесительный наконечник ДС Полир жёлтый**

Используется для работы с коррегирующим слоем к А-силиконовым слепочным массам



**Смесительный наконечник ДС Полир синий**

Используется для работы с материалами при изготовлении временных коронок



**Интраоральный наконечник ДС Полир**

Внутриротовые канюли для нанесения коррегирующей массы по границам препарирования



**Дезинфицирующие салфетки ДЕКЛИНЕР**

Готовые салфетки из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством, обеспечивают одновременную защиту и дезинфекцию поверхностей от всех видов микрофлоры.

Эффективные в отношении Грам(+), Грам(-) бактерий (включая возбудителей ВБИ, микробактерии туберкулеза, кишечных инфекций), грибов рода Кандида, Трихофитон, вирусов (включая ОРВИ, золотистый стафилококк, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, в том числе гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекцию, аденовирус).

При интенсивном потоке пациентов очень важно иметь возможность быстро, качественно и финансово оправданно проводить антисептическую обработку. «Дезклинер» предназначены для применения в лечебно-профилактических, учреждениях в том числе в стоматологических кабинетах для обработки:

- ➔ поверхностей жесткой мебели (подголовники, подлокотники кресел и др.);
- ➔ поверхностей медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала, для очистки предметных стекол от иммерсионного масла);
- ➔ осветительной аппаратуры, жалюзи и т.п.;
- ➔ столов (в т.ч. операционных), гинекологических и стоматологических кресел;
- ➔ телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной клавиатуры и другой офисной техники, и т.д.

Размер салфетки: 130x175 мм  
Количество салфеток: 200 шт.



## Многофункциональная смазка для стоматологических наконечников

Сервисное масло «ДС ОЙЛ+» является смесью синтетических масел высокой степени очистки. Служит для ежедневного ухода за турбинными, прямыми наконечниками в смазочных аппаратах.



## Многофункциональные спрей-смазки «ДС ОЙЛ» и «ДС ОЙЛ+»

Спрей универсален для прямых и угловых стоматологических наконечников, головок, шарикоподшипниковых турбин и микромоторов электрических и воздушных, хирургического оборудования.

Давно доказано, что срок службы стоматологических наконечников как турбинных, так и механических, зависит от качества используемых боров, от прикладываемых во время препарирования сил и, конечно, от условия их обслуживания - регулярности чистки и смазки. Именно от смазки зависит, как часто вы будете менять роторные группы. В ассортименте фирмы «Эстэйд-Сервисгруп» есть высококачественные спрей-смазки «ДС ОЙЛ» и «ДС ОЙЛ+», в своем составе не содержащие фреон, которые позволяют надолго сохранить высокие рабочие характеристики наконечников. При обработке спрей-смазками «ДС ОЙЛ» и «ДС ОЙЛ+» через каждые 20-30 мин. непрерывной работы наконечника, вы сохраняете подшипники роторной группы от излишнего износа и значительно экономите на его техобслуживании.



### Спрей-смазка «ДС ОЙЛ»

Многофункциональный смазочный спрей для стоматологических наконечников  
Объем: 650 мл  
Состав: синтетическое масло с максимальной степенью очистки



### Спрей-смазка «ДС ОЙЛ+»

Многофункциональный смазочный спрей для стоматологических наконечников

Объем: 650 мл  
Состав: смесь синтетических масел

## Спрей анестезирующий ДИСИЛАН

Спрей анестезирующий 30 мл для местной анестезии слизистой ткани рта на основе бензокаина 20%



## Гель-паста анестезирующий ДИСИЛАН

Гель-паста анестезирующий 30 мл для местной анестезии слизистой ткани рта на основе бензокаина 20%  
5 вкусов: апельсин, вишня, черная смородина, тутти фрутти, клубника



Препараты ДИСИЛАН хорошо зарекомендовали себя благодаря предсказуемому и глубокому обезболивающему эффекту слизистой оболочки полости рта, как перед вколom иглы для инъекционной анестезии, так и для небольших разрезов, вскрытия абсцессов и коррекции десневого края. Действие анестезии наступает через 1–2 мин. и продолжается до 15 мин. «Дисилан» может использоваться как для взрослых, так и для детей от 5-ти лет.




## Шприц эндодонтический

Для промывания корневых каналов зубов ирригационными растворами при проведении эндодонтического лечения



## Иглы эндодонтические однократного использования 0,4\*35 мм

Фасовка в коробках по 20 и 50 шт. Иглы эндодонтические используются для промывки корневых каналов. После использования подлежат обязательной утилизации

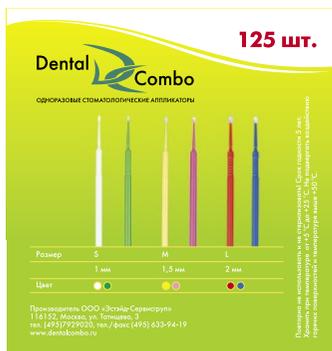

### Аппликатор для нанесения жидкостей и гелей одноразовый «ДС Браш»

Предназначены для экономичного нанесения материалов. - S,M,L. В упаковке 125 шт. Срок годности - 5 лет. Не стерилизовать и повторно не использовать.



### Стекловолоконные штифты цилиндрические

Выпускается 8 размеров штифтов  
Длина штифта 18 мм

Диаметр	1	1,15	1,25	1,4
Цвет блистера	красный	розово-оранжевый	желтый	бледно-желтый
Диаметр	1,5	1,6	1,7	1,8
Цвет блистера	синий	сиреневый	голубой	салатовый



### Стекловолоконные штифты культевидные

Выпускается 8 размеров штифтов  
Длина штифта 18 мм

Разработаны для экономии стоматологических материалов, ускорения и простоты работы врача. Культевидная часть поддается обработке, поэтому штифты могут применяться на любые группы зубов.



Диаметр	1	1,15	1,25	1,4
Цвет блистера	красный	розово-оранжевый	желтый	бледно-желтый
Диаметр	1,5	1,6	1,7	1,8
Цвет блистера	синий	сиреневый	голубой	салатовый

### Стекловолоконные штифты-балки

Размер 2x2x30 мм

Предназначены для армирования адгезивных мостовидных конструкций, композитных вкладок, временных протезов.



### Стекловолоконные штифты конусные

Выпускается 4 размера штифтов  
Длина штифта 20 мм

Диаметр	1,4 (№1)	1,5 (№2)	1,7 (№3)	1,8 (№4)
Цвет блистера	бледно-желтый	синий	голубой	салатовый



### Контейнер-укладка полимерный для стерилизации и хранения стоматологических инструментов КУП – 01- «Э-С»

Подходит для автоклавирования. Прочный, термостойкий корпус выдерживает нагрев до 200°C/390°F



### КЛИНСТЭНД и диски поролоновые SPONGES Ø 50 мм

Клинстэнд используется как подставка для предстерилизационной очистки эндодотического инструментария.




Диски подходят для клинстэдов производства Maillefer и VDW. Размер дисков Ø 50 мм и высота 10 мм, в упаковке по 25 шт.

### Гласперленовый наполнитель

Применим для всех видов гласперленовых стерилизаторов. Стерилизация происходит посредством обработки медицинского инструмента высокой температурой (230 °C). Для этого используется металлический стакан с на наполнителем. Электрический тэн нагревает колбу, в которой находятся инструменты. Передача тепла происходит через наполнитель.

Диаметр шариков 0,8-1,0 мм  
Вес 250 г

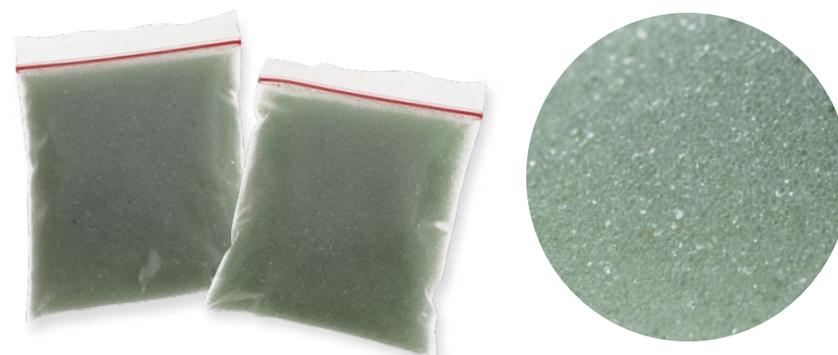

### Зажимы с цепочкой для салфеток

Зажимы типа «крокодил» на металлической цепочке для крепления одноразовых салфеток. Разработаны с учетом анатомических особенностей человека, удобные в использовании и надежные. Оптимальная длина изделия 40 см.



**г. Барнаул**

ООО «Сибирская Медицинская компания» (3852) 200-782, 200-781

**г. Владимир**

ООО СП «Хиратрейд» (4922) 32-60-24, 32-35-13, 42-05-32

**г. Волгоград**

ООО «Ультрастом» (8442) 528-820

**г. Воронеж**

ООО «Альфа Система» (473) 224-65-55, (473) 224-68-88

**г. Екатеринбург**

ООО «Мастер Дент» (343) 287-50-50, (343) 200-90-55

ООО МО «Новая больница» (343) 212-90-00

ООО «Медторг СВ» (343) 311-60-70, 200-71-41

ООО «Торговый Дом «Гарант» (343) 304-60-02, 03, 08, (909) 010-20-83

**г. Ижевск**

ООО «МастерМед НПФ» (3412) 67-57-47, 55-59-59

ООО РСК «Медицина» (3412) 930-151, 930-152, 153, 154

ООО «Уральская Медицинская Компания» (3412) 72-30-16, 72-64-87

ООО «Ижевская медицина» (3412) 930-153

**г. Иваново**

ООО «Ивановская медицинская компания» (4932) 41-29-28, (4932) 32-88-62

**г. Казань**

ООО «Фирма «Камед» (843) 236-64-73, (495) 780-92-44

ООО «Рокада Мед» (843) 570-68-80, 570-68-82

ООО «Наири-Х» (843) 520-77-50, 520-77-46, 290-12-85

**г. Кемерово**

ООО «Стомлюкс» (3842) 75-63-50, 33-49-72

**г. Краснодар**

ООО «СВВ» (861) 239-33-34, 239-01-71

ООО «Казанские инструменты» (861) 268-69-73

**г. Красноярск**

ООО ПВП «Контакт» (391) 273-71-56, (39175) 2-31-56

ООО «МедЛайн» (391) 218-18-24

**г. Москва**

ООО «Алекс Форте» (495) 930-53-24, (495) 30-53-69, (495) 930-53-76

ООО «Дентэкспресс» (495) 942-36-34, 942-78-85

ООО «Эль-Дент» (495) 789-67-39

ООО «Энигма Дент» (495) 787-32-74, 787-32-75

ООО «Ника Дент плюс» (495) 580-64-72

ООО «Торговый дом Лето» (495) 504-36-81

ООО «Фармгеоком» (495) 411-53-43, (495) 411-53-44

ООО «Авель-Дентал Трейд» (499) 502-08-30

ООО «Дезнэт» (495) 980-08-99

ООО «Стоматорг» (495) 620-97-34, 620-97-35

ООО «Дентомир» (495) 785-22-70

**г. Назрань**

ИП «Ужахов Иса Салманович» (873) 222-64-70

**г. Нижний Новгород**

ООО «Торговый дом «Медтехника» (831) 432-59-98

ООО «Аптечная служба» (831) 422-56-26, 422-56-15, 422-54-87

**г. Новосибирск**

ООО «Шаклин» (383) 3-360-123, 3-356-123

ООО «Денталия» (383) 220-54-87, 209-18-78

**г. Омск**

ООО «РА-Мед» (3812) 21-22-10, 21-22-07

ООО «Полидента» (3812) 23-64-39, 24-84-73

**г. Пенза**

ООО «Альба-Дент» (8412) 56-23-52, 56-33-38

**г. Санкт-Петербург**

ООО «Зубная Архитектура» (812) 449-90-01

ООО «Медицина Санкт-Петербург» (812) 449-47-97

ООО «ПетроМедЦентр» (812) 295-52-27, (812) 295-90-98

ООО «Симфония Материалофф»

(812) 988-57-78, (812) 928-57-78

(812) 703-57-78

Компания Алвик Медэкспресс (812) 326-29-17, 8-800-550-29-17

Группа компаний «Северная Каролина» (812) 702-81-12

ООО «Н.Селла» (812) 313-19-31

**г. Саратов**

ООО «Айсберг Д» (845-2) 43-17-33, 43-17-34

**г. Сочи**

ООО «Империя Дент» (8622) 33-16-48

**г. Смоленск**

ООО «Дента» (4812) 649-666, 628-276

**г. Ставрополь**

ООО «Медицина Дент» (8652) 73-57-67, (8652) 55-56-36

ООО «Статус-СТ» (8652) 37-06-73

**г. Томск**

ООО «Элион+» (3822) 51-26-31

**г. Чебоксары**

ООО «Мегадез» (8352) 51-10-29

ООО «БААЛ» (8352) 23-81-80

**г. Ярославль**

ООО «Ярославская медицинская компания» (4852) 73-10-36

**Республика Беларусь,****г. Пинск**

ЗАО «Белмедпоставка» 8-10-375 (165) 37-99-23, 37-99-74.

**Республика Казахстан,****г. Астана**

ТОО «Диастом» (7172) 77-03-04, (7017) 40-70-03

**г. Актау**

ТОО «Stomat CO» (7292) 603-431, (771) 498-89-84

**г. Алматы**

ТОО «Профимед Т.М.» (7272) 38-39-51, (7017) 40-70-03

ТОО «Дельта-Фарм» (727) 225-74-24, (707) 744-22-45, (708) 888-35-01

**г. Шымкент**

ТОО «Диастом» (7252) 53-40-90, (7252) 53-61-63, (7017) 40-70-03

ТОО «Мегастом» (7252) 200-924, 284-806